




Abbott

# ERMÖGLICHT EINE ZEITNAHE DIFFERENZIALDIAGNOSTIK UND BEHANDLUNG

## VON COVID-19 UND INFLUENZA A&B MIT EINEM EINZIGEN ABSTRICH


### PANBIO™ COVID-19/FLU A&B RAPID PANEL (NASOPHARYNGEAL)

- Für Patienten, bei denen Symptome oder der Verdacht auf eine akute COVID-19-Infektion sowie einer Infektion mit Influenza A und/oder B vorliegen
- Nur 1 Nasopharyngealabstrich für COVID-19 und Influenza A&B
- Vereinfachter Arbeitsablauf mit vorgefülltem Pufferröhrchen
- Keine Instrumente zur Interpretation der Ergebnisse erforderlich
- Ergebnisse in 15 Minuten

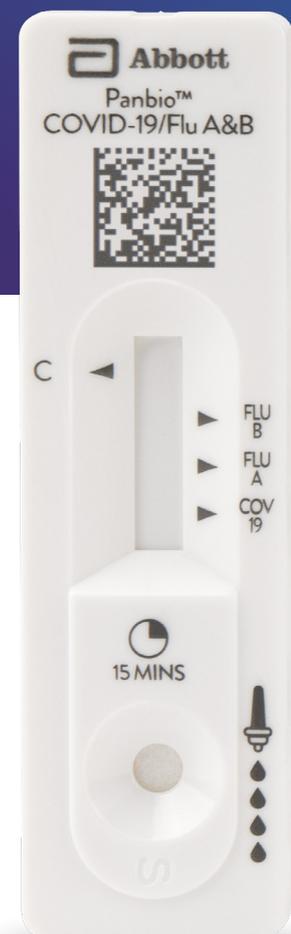

Panbio™ ist eine vertrauensvolle Marke und wird in mehr als 100 Ländern eingesetzt.


# FÜR EINFACHES TESTEN KONZIPIERT

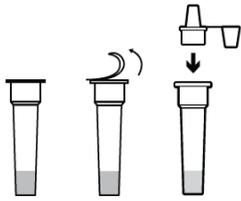

● VORGEFÜLLTES PUFFERRÖHRCHEN MIT INTEGRIERTER TROPFKAPPE. KEIN MANUELLES BEFÜLLEN ERFORDERLICH




● NUR EIN PROBENENTNAHMETUPFER NOTWENDIG

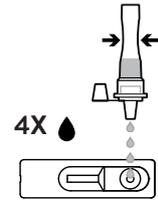

● EINFACHES DESIGN DER TESTKASSETTE MIT EINER PROBENVERTIEFUNG

## TESTVERFAHREN

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung zur kompletten Vorgehensweise.

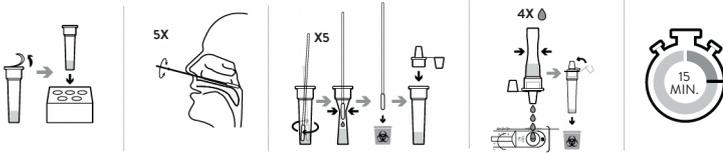

## SPEZIFIKATIONEN

- **TESTDAUER:** 15 MINUTEN
- **LAGERUNG:** 2 °C – 30 °C
- **CE-KENNZEICHNUNG**
- **PROBENTYP:** Nasopharyngealabstrich

## LEISTUNG

	COVID-19	COVID-19 (Ct ≤ 30)	INFLUENZA A	INFLUENZA B
<b>SENSITIVITÄT</b>	88,0 %	94,4 %	92,0 %	100 %
<b>SPEZIFITÄT</b>	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>95%-KI (Sens.)</b>	80 % – 93,6 %	87,5 % – 98,2 %	80,8 % – 97,8 %	92,9 % – 100 %
<b>95%-KI (Spez.)</b>	98,2 % – 100 %	98,2 % – 100 %	98,2 % – 100 %	98,2 % – 100 %

**VERWENDUNGSZWECK:** Der Panbio™ COVID-19/Flu A&B Rapid Panel (NP) ist ein diagnostischer In-vitro-Schnelltest für den qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2- und Influenza A&B-Antigen (Ag) in menschlichen Nasopharyngeal-Abstrichproben von Personen, die die klinischen und/oder epidemiologischen Kriterien für COVID-19 und Influenza erfüllen. Panbio™ COVID-19/Flu A&B Rapid Panel (NP) ist für den professionellen Einsatz vorgesehen und dient als Hilfsmittel zur Diagnostik von SARS-CoV-2- und Influenza-Infektionen. Das Produkt kann in Labor- und Nicht-Laborumgebungen verwendet werden.

Der Test liefert vorläufige Testergebnisse. Negative Testergebnisse schließen eine SARS-CoV-2- und Influenza A&B-Infektion nicht aus und dürfen nicht als alleinige Grundlage für eine weitere Behandlung oder andere Versorgungsentscheidungen herangezogen werden. Negative Ergebnisse sollten mit klinischen Beobachtungen, der Patientenanamnese und epidemiologischen Informationen kombiniert werden.

## BESTELLINFORMATIONEN

- **Panbio™ COVID-19/Flu A&B Rapid Panel (Nasopharyngeal)**
- **KATALOGNUMMER:** 62FK10; 10 Tests/Kit (Kontrollkit separat erhältlich; Katalognummer: 62FK11C)
- **INHALT:** 10 Testkassetten, 10 Extraktionspufferröhrchen, 10 Deckel für Extraktionsröhrchen, 10 sterilisierte Nasopharyngealtupfer für die Probenentnahme, 1 Röhrchenhalter, 1 Gebrauchsanweisung (IFU) mit Kurzanleitung (QRG)

**WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI IHREM LOKALEN VERTRETER ODER UNTER GLOBALPOINTOF CARE.ABBOTT**