

Mode d'emploi femSense Fertilité



©SteadySense GmbH,
Kärntner Straße 518,
8054 Seiersberg-Pirka, Autriche,
version: 2.0,
date d'émission: 2021-04-29

Description des symboles



Numéro de lot



Fabricant



Utilisable jusqu'à





Dispositif médical



Produit à usage unique



À jeter dans un point de collecte pour piles

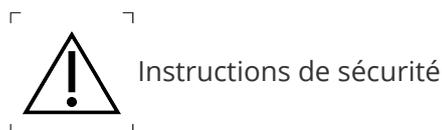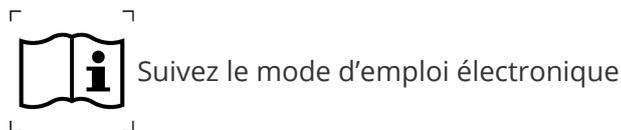

Mode d'emploi

Veillez lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité et les suivre. Une utilisation ou une élimination inadéquate peut être préjudiciable à la santé et peut entraîner des risques pour autrui.

Qu'est-ce que c'est femSense Fertilité?

femSense Fertilité est un dispositif médical permettant de déterminer la fertilité des femmes en âge de procréer. femSense Fertilité se compose d'un patch portable pour la mesure de température, le patch femSense, et de l'application smartphone correspondante pour iOS et Android.

Le patch femSense est un dispositif jetable qui est fixé sous l'aisselle et porté pendant le cycle menstruel jusqu'à 7 jours, où il enregistre en continu la température du corps afin de déterminer le statut de fertilité basé sur les données de température mesurées.

L'application femSense Fertilité peut être utilisée pour la détermination de la fertilité ainsi que pour le désir d'enfant. L'application femSense est un accessoire du patch femSense, qui sert d'interface utilisateur pour afficher l'état de fertilité et coordonner les actions avec le patch. Dans l'application femSense, vous pouvez sélectionner vous-même le mode de fonctionnement:

- En mode Désir d'enfant, l'application vous donne des informations sur votre cycle, vos jours fertiles et si et quand l'ovulation a pu être détectée.

- En mode Suivi de la fertilité, l'application vous donne des informations sur votre état de fertilité quotidien, vous indique les jours de haute fertilité et si et quand l'ovulation a pu être détectée.

Le patch femSense est un produit non invasif qui ne peut être appliqué que sur une peau saine et qui, sur la base des mesures de la température corporelle, fournit des informations sur les jours de fertilité d'une femme sans aucun but diagnostique ou thérapeutique. femSense n'affiche pas les valeurs de température.

A qui s'adresse femSense Fertilisé ?

femSense est destiné aux femmes en âge de procréer (16-49 ans) qui désirent avoir des enfants ou qui veulent suivre l'état de fertilité de leur cycle menstruel.



La fertilité de FemSense n'est pas un moyen de contraception et ne protège pas contre les maladies sexuellement transmissibles.

Limitations

Sous diverses indications médicales, femSense ne peut pas déterminer l'ovulation de manière fiable. Il s'agit notamment de :

- Maladies graves, aiguës ou chroniques
- Abus de nicotine ou d'alcool
- Aménorrhée
- Oligoménorrhée (saignements menstruels trop rares)
- Syndrome des ovaires polykystiques (SOPK)
- Obésité (IMC > 30)
- Hirsutisme
- Allergie connue aux ingrédients des patchs cutanés
- Médicaments qui peuvent influencer sur la température corporelle.
- Les traitements hormonaux peuvent affecter la température corporelle et donc la fiabilité de femSense

La fiabilité de femSense Fertility peut être réduite par des conditions de poids extrêmes. Si vous n'êtes pas sûre que femSense vous convienne, veuillez consulter votre médecin avant de l'utiliser.



Instructions de sécurité

- Le patch est un produit jetable, à n'utiliser qu'une seule fois et pas plus de 7 jours.
- N'utilisez pas le patch si vous êtes malade.
- Gardez le patch loin des enfants, des animaux et des personnes handicapées.

- Ne pas appliquer le patch sur des plaies ou des abrasions.
- N'utilisez pas le patch si vous êtes allergique aux adhésifs.
- Ne pas plier ou courber le patch.
- Ne prenez pas de longs bains ou n'allez pas nager en portant le patch.
- N'utilisez pas le patch s'il a été endommagé ou contaminé.
- Ne pas appliquer le patch si la surface adhésive a été contaminée.
- N'essayez pas de démonter ou d'ouvrir le patch.
- Si vous retirez un patch et avez l'intention d'appliquer un nouveau patch au cours du cycle suivant, placez-le sous l'autre bras.
- Retirez le patch avant un scan CT et MRI.
- Il s'agit d'un appareil électronique miniature. Par conséquent, veuillez ne pas jeter le patch avec les déchets ménagers normaux.
- Ne pas jeter le patch dans le feu, la batterie pourrait exploser.
- Ne portez pas le patch plus longtemps qu'indiqué dans l'application.
- Si le patch provoque des inconforts sur votre peau, retirez-le immédiatement.
- Utilisez le patch uniquement dans les conditions d'environnement spécifiées.
- Conservez le patch dans un endroit sec et protégez-le de la lumière du soleil.
- Le port du patch peut provoquer une irritation locale de la peau, Après le retrait du patch, celles-ci devraient avoir disparu au bout de 24 à 48 heures.
- Le patch ne doit pas être appliqué sur des êtres vivants qui n'appartiennent pas au groupe d'utilisateurs spécifique de femSense Fertilité (femmes âgées de 16 à 49 ans).
- Le patch ne doit pas être exposé en permanence à un champ NFC.



Conseils d'utilisation

- femSense est destiné à la détermination de la fertilité et n'affiche pas les courbes de température.
- Le patch ne peut être lu que via NFC.
- Vous avez besoin de l'application femSense pour pouvoir utiliser un patch.
- Le patch ne doit être porté que conformément aux instructions de l'application.
- Un seul patch peut être utilisé par cycle.
- En cas de fortes fluctuations de la durée du cycle la fiabilité de femSense peut être réduite.
- Le patch doit être placé correctement sous le bras pour déterminer l'ovulation de manière fiable
- N'appliquez le patch que lorsque l'appli vous demande de le faire
- Appliquez le patch selon le mode d'emploi.
- Lavez et séchez soigneusement la peau sous le bras avant d'appliquer le patch.
- Ne pas utiliser de déodorants ou de crèmes avant l'application.
- Ne touchez pas le côté collant du patch car cela pourrait affecter son adhérence.
- Frottez soigneusement le patch sur tous les côtés après l'application
- Le patch doit être lu via NFC au moins une fois par jour pour recevoir les mises à jour quotidiennes.
- Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de lire le patch tous les jours, matin et soir.
- La durée maximale d'application du patch est de 7 jours.
- Retirez immédiatement le patch s'il vous semble inconfortable.

- Évitez les sports ou autres activités physiques intenses qui provoquent une transpiration excessive (sauna/bain vapeur) lorsque vous portez le patch.
- Évitez les bains de soleil prolongés et les environnements qui peuvent affecter de manière significative la température de votre surface pendant l'utilisation.
- Vous pouvez porter le patch à tout moment pour les activités quotidiennes telles que l'hygiène personnelle, le travail ou une activité physique légère.



Aide

Si le produit fonctionne mal lors de l'utilisation de femSense ou si des effets secondaires inattendus se produisent, veuillez contacter notre support technique: support@femsense.com ou cliquez sur "Contactez le support" dans le menu de l'application femSense. Pour plus d'informations sur le soutien, voir www.femsense.com/fr/faq

Télécharger l'application femSense Fertilité



Application pour iPhone 7 et plus



Smartphones Android avec NFC

Les modes de fonctionnement de femSense Fertilité

femSense Fertilité offre deux modes de fonctionnement,

- le mode Désir d'enfant pour les femmes qui veulent tomber enceinte et
- le mode Suivi de la fertilité qui permet aux femmes de suivre leur état de fertilité.

Lorsque vous vous enregistrez dans l'application femSense, vous devez choisir l'un des deux modes. Vous pouvez modifier cette décision à tout moment par la suite dans le menu de l'application femSense. Selon le mode que vous sélectionnez, l'écran "Aujourd'hui" s'affiche de manière légèrement différente.

L'utilisation du patch

Après l'enregistrement et la saisie réussis des données de votre cycle, femSense calcule un profil de cycle individuel et vous indique dans le calendrier le moment où vous êtes susceptible d'être le plus fertile. L'écran "Aujourd'hui" vous indiquera quand appliquer le patch femSense.

Une fois que le jour de collage du patch est arrivé, veuillez suivre les étapes suivantes.



1. Préparation

Si l'application femSense vous dit de mettre le patch, prenez une douche avec un savon non gras ou un gel douche et séchez soigneusement la zone sous l'aisselle. Vous pouvez également nettoyer le site d'adhésion avec une lingette désinfectante. Assurez-vous de ne pas utiliser de déodorant ou de lotion corporelle avant d'appliquer le patch, car cela peut réduire le pouvoir adhésif.




À l'intérieur de l'emballage du produit femSense, vous trouverez des instructions rapides sur la façon de coller le patch.



2. Appliquer le patch


Pour appliquer le patch, détendez votre épaule, placez votre main sur votre hanche, et placez 3 doigts dans votre aisselle pour déterminer la position de l'adhésif. Retirez la petite partie de la feuille de support et fixez le patch avec la petite zone adhésive. Maintenant, avant d'appliquer le patch, placez à nouveau votre main dans la hanche et détendez votre épaule.



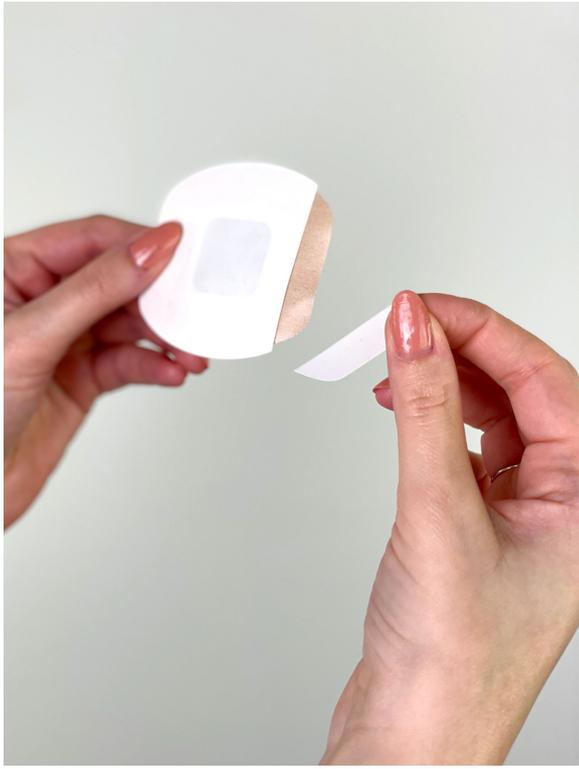



Le patch doit être appliqué de manière à être centré entre la poitrine et le dos, et de manière à ce que le bord supérieur du patch ait trois doigts de large sous l'aisselle. Veuillez coller le patch de manière à ce que les côtés ronds soient orientés vers le haut et le bas. Assurez-vous que votre épaule est dans une position détendue et que votre main est sur votre hanche pendant que vous appliquez le patch. Ensuite, repliez le patch sur le bord et retirez la partie restante du support adhésif. Etalez bien le patch sur tous les côtés.**

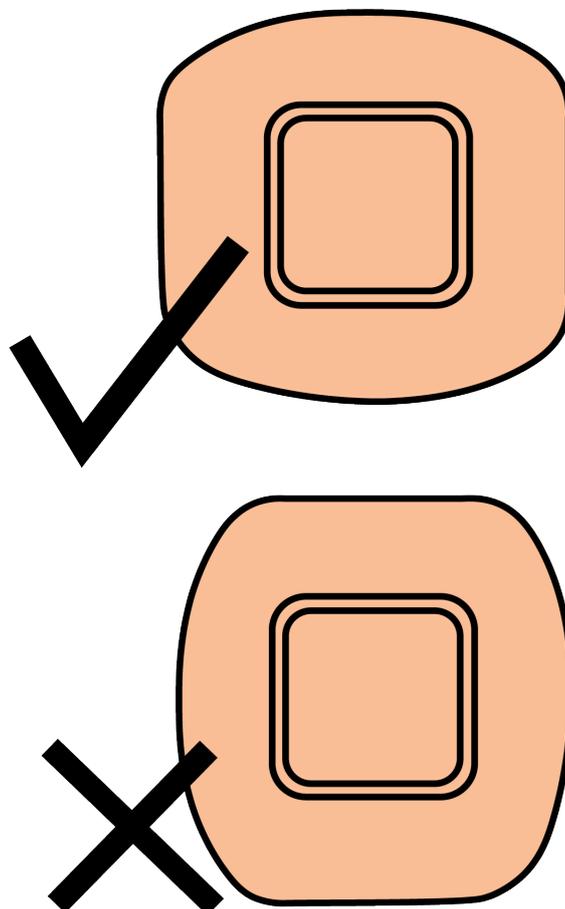



3. Démarrer le patch




Après avoir mis le patch sous votre aisselle, vous pouvez l'activer. Appuyez sur "Lire le patch" dans l'application femSense et maintenez l'arrière de votre smartphone pendant quelques secondes tranquillement au centre du patch pour l'activer. Une vibration confirme la réussite de l'activation.



Position pour la communication NFC

Selon le fabricant de votre téléphone portable et votre système d'exploitation (Apple iOS ou Android), le smartphone doit être tenu différemment sur le patch pour le lire de manière optimale.

- **iPhone:** Gardez l'arrière du bord supérieur légèrement incliné vers le centre du patch.
- **Android:** Avec un Android, l'antenne NFC peut être placée à différentes positions sur le smartphone. Tenez la zone de la caméra au centre du patch, ou l'arrière du smartphone au centre du patch. Veuillez vous assurer que vous avez allumé le NFC. Le NFC peut être activé dans le menu rapide ou dans les paramètres.

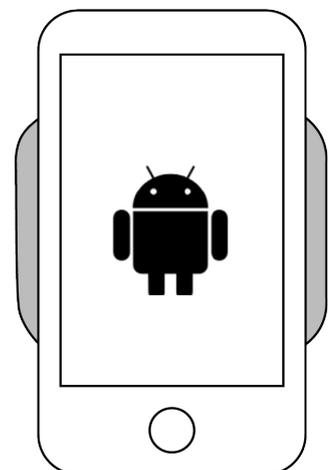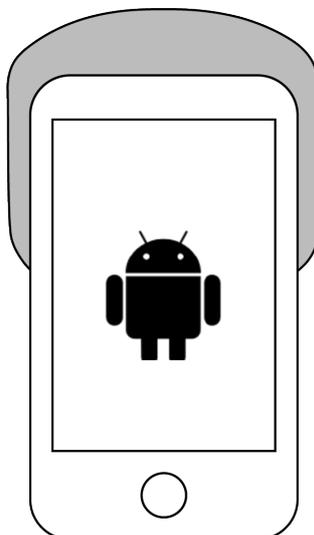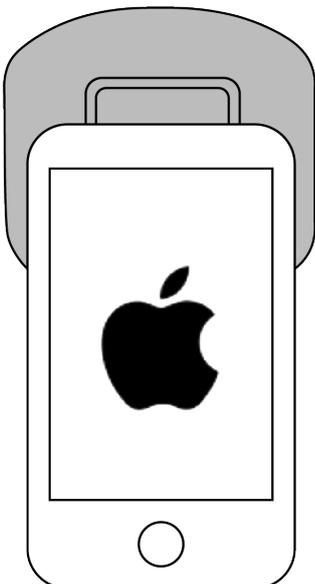

4. Lire le patch

Une fois que vous avez commencé, vous devez lire le patch deux fois par jour pour obtenir des mises à jour sur votre état de fertilité ainsi que sur votre ovulation. Pour ce faire, appuyez sur "Aujourd'hui" dans le menu rapide de l'application femSense, appuyez sur "Lire le patch" et maintenez le smartphone sur le patch comme décrit au [point 3] (###3. Démarrer le patch). Les données de votre température seront lues par le patch et vous pourrez voir si votre ovulation a été détectée. Vous pouvez également lire le patch plusieurs fois par jour.

Le calendrier

Le calendrier de l'application femSense est un suivi de cycle où vous pouvez recevoir les prévisions de vos prochaines règles, ainsi que vos jours de fécondité, et vous pouvez également entrer des données vous-même. Le calendrier indique également quand appliquer le patch.

En mode Desir d'enfant, les jours fertiles sont marqués par des cœurs et les jours de règles prévus et entrés sont mis en évidence en rose clair et foncé. En mode Suivi de la fertilité, les jours de haute fertilité sont affichés en rose. Si votre statut de fertilité ne peut être clairement déterminé par femSense, ces jours sont marqués en gris dans le calendrier. L'affichage des jours de règles est identique à celui du mode de suivi de la fertilité.

Si femSense a déterminé votre ovulation, le jour de l'ovulation est marqué avec un anneau rose. Si vous tapez sur une date dans le calendrier, vous accédez à la vue détaillée du jour en question. En appuyant sur le bouton (+), vous pouvez effectuer d'autres saisies telles que les périodes, les maladies ou les activités sportives. Toutes les données que vous saisissez seront traitées de manière confidentielle et ne seront pas transmises à des tiers.

Les statistiques

Dans les statistiques, vous pouvez voir un résumé de vos cycles suivis avec femSense, la durée moyenne des cycles et des jours de règles ainsi qu'un aperçu des données saisies dans le cycle.

Le menu

Le menu de l'application femSense est divisé en 2 sections où vous pouvez gérer votre compte et trouver des fonctionnalités et des informations supplémentaires.

Dans la rubrique "Moi et mon corps", vous pouvez consulter et modifier votre compte ainsi que les données de l'utilisateur. Sous "Sélection du mode", vous pouvez modifier le mode de fonctionnement de l'application. En outre, la rubrique "Mon corps" permet d'activer le mode "grossesse" de l'application. Dans ce mode, l'écran "Aujourd'hui" change et vous obtenez des informations sur l'évolution de votre grossesse.

Dans "femSense", vous trouverez le mode d'emploi ainsi que les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité, toutes les vidéos explicatives et les didacticiels de l'application femSense et vous pourrez consulter la version de l'application femSense dans "À propos de femSense". En cliquant sur "Contactez le support", vous pouvez contacter le support technique en cas de problème. Le bouton FAQ vous mènera aux questions les plus fréquemment posées.

En outre, le menu de l'application vous mènera à la boutique en ligne femSense ainsi qu'au blog femSense et vous pourrez également évaluer femSense dans l'App Store.

Plus d'informations

- Conditions générales : <https://www.femsense.com/fr/conditions>
- Protection des données: <https://www.femsense.com/fr/dataprotection>
- Rétractation: <https://www.femsense.com/fr/cancellation>
- Mentions légales : <https://www.femsense.com/fr/legal-notice>

Suivez-nous sur les médias sociaux



Traitement des déchets

Le Patch est alimenté par une pile bouton et est donc considéré comme un appareil électronique. Il ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères normales, mais doit être éliminé conformément aux réglementations locales sur les piles et les déchets électriques. Le carton d'emballage et l'emballage pour le transport de femSense sont fabriqués en papier recyclé ou en carton et doivent être jetés dans la poubelle papier. Les emballages individuels peuvent être séparés et jetés dans les déchets de plastique ou de papier.



Spécifications techniques

- Appareil de mesure: capteur de température pour la détection de l'ovulation
- Lieu de mesure: sur le côté de la poitrine sous le bras
- Type d'utilisation : Produit jetable
- Durée typique d'utilisation : 7 jours
- Conditions de fonctionnement :
 - Température ambiante: +15 à +42°C
 - Humidité: 15 à 95%, sans condensation
 - Pression d'air : 86 à 106 kPa
- Conditions de transport et de stockage:
 - Température ambiante: 0 à +40°C
 - Humidité: 15 à 95%, sans condensation
 - Pression d'air: 86 à 106 kPa
- Compatibilité système :
 - iPhone : iOS13 ou plus récent sur iPhone 7 ou modèles plus récents
 - Android : Android OS 6.0 Marshmallow ou plus récent sur un smartphone compatible NFC
- Connexion Internet au moins 3G ou WIFI
- Garantie : 2 ans après la production
- Dimensions patch : 66,3 x 61,2 x 3 mm
- Poids : 3 g
- Source d'alimentation : pile bouton au lithium de 3 V
- Cote IP : IPX5 - protection contre les jets d'eau de toute direction