
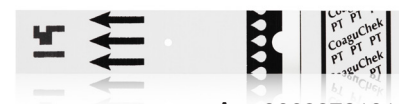


Kurzanleitung CoaguChek® Pro II System

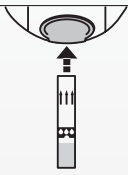

Art. 06688721016

Durchführung einer PT-Messung

	a) Im Hauptmenü  Patiententest wählen - mit Option «Patienten-ID» Patienten-ID mit Namen oder Nummer auf Bildschirmtastatur eingeben oder einscannen - ohne Option «Patienten-ID» Symbol zum Einschieben des Teststreifens erscheint - mit aktivierter Option «Parameterauswahl» entsprechenden Test auswählen
	b) Nachdem das Symbol zum Einschieben des Teststreifens erscheint, Teststreifen – mit dem schwarzen Schriftzug «CoaguChek PT» nach oben – einführen (Wenn eine neue Teststreifencharge verwendet wird, muss spätestens jetzt der neue Code-Chip eingeführt werden)
	c) Sanduhrsymbol zeigt das Aufwärmen des Teststreifens an
	d) Nach Abschluss des Aufwärmens zeigt das blinkende Tropfensymbol an, dass das Gerät messbereit ist Gleichzeitig beginnt ein Countdown über 3 Minuten Der Blutstropfen (mind. 8 µl) muss innerhalb von 15 Sekunden nach Punktion der Fingerbeere aufgetragen werden
	e) Erst bei Erscheinen des Tropfensymbols die Fingerpunktion durchführen und das Blut innerhalb von 15 Sekunden auftragen, wobei 3 Möglichkeiten bestehen: 1. direkt vom Finger den Blutstropfen auf das halbrunde durchsichtige Probenauftragsfeld auftragen 2. Blutstropfen seitlich an das Auftragsfeld halten – Kapillarwirkung zieht das Blut ein 3. Blutstropfen mit CoaguChek Kapillare auf das halbrunde, durchsichtige Probenauftragsfeld auftragen
	f) Bei genügender Menge Blut (mind. 8 µl) erscheint das Sanduhrsymbol und die Messung beginnt
	g) Messergebnis wird in gewählter Einheit angegeben und gespeichert
	h) 3 Möglichkeiten: 1. Kommentar hinzufügen 2. QR Code anzeigen 3. Rückkehr zum Hauptmenü, Teststreifen entnehmen und Gerät ausschalten
	Messbereich: INR: 0.8 – 8.0 %Q: 5 – 120 SEC: 9.6 – 96

Durchführung einer PT-Qualitätskontrolle



Art. 06679684190

1. Qualitätskontrolle auflösen

- Fläschchen mit **schwarzem Deckel**, Pipette und Code-Chip bereitstellen
- Deckel des Fläschchens öffnen und Gummikappe vorsichtig entfernen
- Pipette mit Hals nach OBEN halten und Flüssigkeit in den Bauch schütteln, anschliessend Pipettenverschluss ganz oben mit einer Schere öffnen und Inhalt der Pipette vollständig ins Fläschchen pipettieren
Die Plastikpipette zum Auftragen der Kontrolle bei Seite legen
- Fläschchen vorsichtig **kreisend bewegen** bis Lyophilisat vollständig gelöst ist
Nicht schütteln oder kippen
- Zur Rekonstitution Fläschchen 5 Minuten verschlossen stehen lassen
- Rekonstituiertes Kontrollmaterial innerhalb von 30 Minuten auftragen**

2. Qualitätskontrolle durchführen

	a) Ein-/Aus-Taste drücken – Hauptmenü wird angezeigt
Kontrolltest	b) Kontrolltest wählen
Kontrolltest Ringversuch	c) bei einer internen Qualitätskontrolle das Feld «Kontrolltest» auswählen, bei einer externen Qualitätskontrolle das Feld «Ringversuch» auswählen
	d) Bei aktivierter Option «Parameterauswahl» entsprechende Kontrolle auswählen Teststreifen einschieben , so dass «CoaguChek PT» nach OBEN zeigt (Falls ein neues Teststreifenlot verwendet wird, zuerst neuen Code-Chip aus Teststreifen Box einschieben)
025 * Neuer Code	e) Auch die Kontroll-Lösung hat einen Code-Chip - Falls Code-Chip-Nr. bei Auswahl bereits vorhanden ist, entsprechenden Code anwählen oder einscannen - Falls Code-Chip-Nr. in der Auswahl noch nicht aufgeführt ist – * Neuer Code wählen, Code-Chip der Teststreifen entfernen und durch Code-Chip der Kontroll-Lösung ersetzen
	f) Level 1 oder Level 2 auswählen
	g) Sanduhrsymbol zeigt das Aufwärmen des Teststreifens an
 3:00 Min	h) Blinkt das Pipetten-Symbol , ist das Gerät messbereit Gleichzeitig beginnt ein Countdown über 3 Minuten
	i) Auftragen der Kontroll-Lösung 8 µl mit der Plastikpipette innerhalb von 3 Minuten
	j) Das Ergebnis wird inklusive des Kontrollbereiches angezeigt
	k) Sie können einen Kommentar hinzufügen oder zum Hauptmenü zurückkehren

COAGUCHEK und WEIL ES MEIN LEBEN IST sind Marken von Roche. © 2016 Roche

Roche Diagnostics (Schweiz) AG
Industriestrasse 7
6343 Rotkreuz
Tel. 041 799 61 00
Fax 041 799 65 55
diagnostics.roche.com/ch-pro2

CoaguChek®
Weil es mein Leben ist