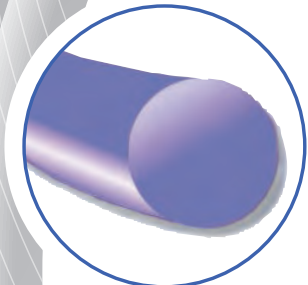



# SURGICRYL<sup>®</sup>

## MONOFILAMENT

### POLYDIOXANONE


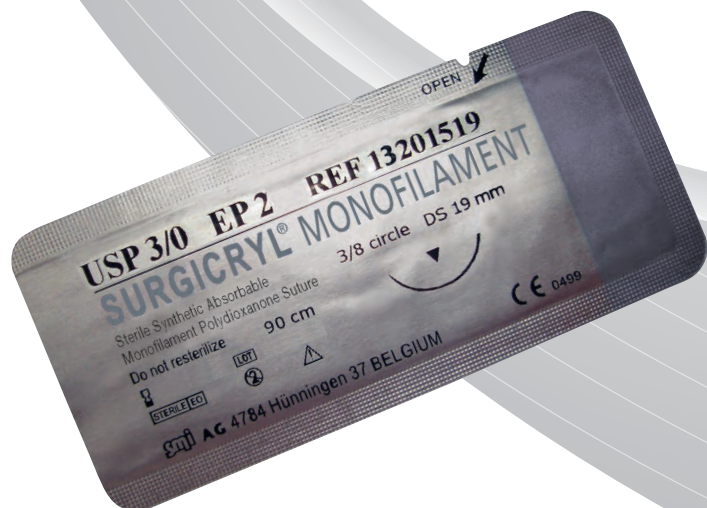
<b>Type</b>	Monofilament
<b>Composition</b>	Polydioxanone, un polymère fait de polyester poly (p-dioxanone)
<b>Enduit</b>	Aucun
<b>Couleur</b>	Violet
<b>Réaction tissulaire</b>	Minimale
<b>Résorption</b>	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 180 à 210 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 42 jours.
<b>Présentation</b>	Boîte de 12 pochettes



Pour qualité  
&  
sécurité

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# SURGICRYL<sup>®</sup>

## MONOFILAMENT

### POLYDIOXANONE

#### CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée et durable
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- Pliabilité et souplesse
- Emballage fermé hermétiquement

#### AVANTAGES

- Persistence exceptionnelle de la résistance à la traction pour un soutien prolongé de la plaie
- Réaction tissulaire minimale
- Taux de résorption prévisible
- Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
- Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
- Nouage excellent
- Bonne maniabilité
- Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

**INDICATIONS**

Rapprochement et soutien des tissus mous en général

spécialement

- Chirurgie générale
- Chirurgie gastro-intestinale
- Chirurgie ophtalmologique
- Chirurgie orthopédique
- Fermeture de la paroi abdominale
- Gynécologie
- Chirurgie plastique
- Urologie

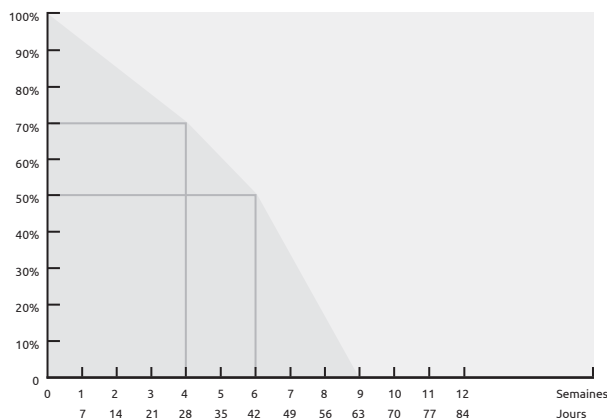
**CONTRE-INDICATIONS**

- Chirurgie cardiovasculaire
- Neurochirurgie
- Prothèses

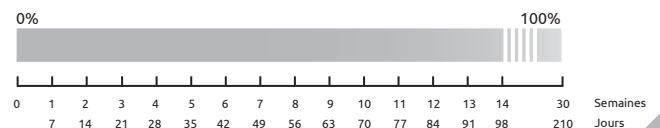
Suture résorbable, ne pas utiliser lorsqu'un rapprochement de tissus de plus de 6 semaines est requis


À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire).










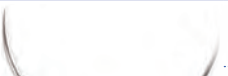
#### RÉSISTANCE À LA TRACTION








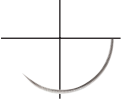

#### RÉSORPTION





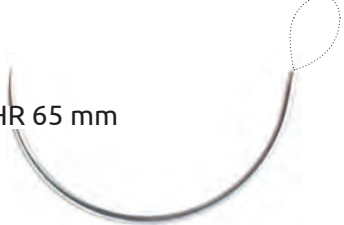



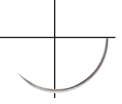






sans aiguille		metric	USP	longueur		référence
		5	2	150 cm	<i>violet</i>	13500015
		6	3&4	150 cm	<i>violet</i>	13600015







aiguille ronde			metric	USP	longueur		référence
<b>1/2 cercle</b> 	HR 13 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070113
			1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100113
	HR 17 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070117
			1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100117
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150117
	HR 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200117
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150122
	HR 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200126
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300126
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13350126
	HR 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200130
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300130
	HR 36 mm		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13350130
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300136
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	13350136
	HR 40 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	13400136
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300140
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	13350140
HR 48 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	13400140	
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	13500140	
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	13400148	
			5	2	90 cm	<i>violet</i>	13500148




aiguille ronde 2 aiguilles			metric	USP	longueur		référence
<b>1/2 cercle</b> 	2 x HR 13 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100113-2
			1	5/0	90 cm	<i>violet</i>	13100117-2
	2 x HR 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150117-2




aiguille ronde 2 aiguilles			metric	USP	longueur	référence	
<b>3/8 cercle</b> 	2 x DR 13 mm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	13050213-2
			0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070213-2

aiguille ronde loop			metric	USP	longueur	référence	
<b>1/2 cercle</b> 	HR 40 mm		3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	13350940
			4	1	150 cm	<i>violet</i>	13400940
	HR 50 mm		3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	13350950
			4	1	150 cm	<i>violet</i>	13400950
			5	2	150 cm	<i>violet</i>	13500950
	HR 65 mm		4	1	150 cm	<i>violet</i>	13400965

aiguille triangulaire			metric	USP	longueur	référence	
<b>3/8 cercle</b> 	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	13071512
			1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	13101512
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151512
	DS 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13101516
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151516
	DS 16 mm black		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13101516VB
	DS 19 mm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	13101519
			1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13101519-75
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151519
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13201519
	DS 19 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	<i>violet</i>	13101516P
	DS 19 mm black		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151519VB

aiguille triangulaire			metric	USP	longueur	référence	
<b>3/8 cercle</b> 	DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151524
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13201524
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301524
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13351524
	DS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13201526
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301526
	DS 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301530
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13351530
	DS 40 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	13401540
			5	2	90 cm	<i>violet</i>	13501540

aiguille triangulaire			metric	USP	longueur	référence	
<b>1/2 cercle</b> 	HS 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301436
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13351436
			4	1	75 cm	<i>violet</i>	13401436

aiguille émoussée loop			metric	USP	longueur	référence	
<b>1/2 cercle</b> 	HRB 50 mm		4	1	150 cm	<i>violet</i>	13401850