

MICRO-TOUCH[®] Nitrile Sterile

Performance - Reihe

Steriler, puderfreier Untersuchungshandschuh aus Nitril - mit verlängerter Stulpe

Dieser sterile Handschuh besteht aus einer synthetischen, hochelastischen Nitrilmischung, die sich durch einen herausragenden Barrierschutz und eine exzellente Durchstichfestigkeit auszeichnet. Die ideale Lösung für sterile Untersuchungen und (nicht chirurgische) Verfahren.

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE:


- Paarweise verpackt
- Verlängerte Stulpe (290 mm) für zusätzlichen Schutz
- Texturierte Finger für eine zusätzliche Griffsicherheit und Zuverlässigkeit
- Schutz vor einer Typ-I-Latexallergie
- Getestet für die Handhabung von Zytostatika*

* Siehe Produktverpackung oder kontaktieren Sie für nähere Informationen über spezifische Permeationszeiten von Zytostatika oder Empfehlungen den Ansell-Kundendienst.

Empfohlen für

- Getestet für die Handhabung von Zytostatika
- Sterile Verfahren außerhalb des OPs
- Zusätzlicher Handgelenk- und Armschutz
- Nachhaltige, hochriskante Untersuchungen
- Schutz des medizinischen Mitarbeiters oder Patienten vor eine Typ-I-Latexallergie

INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN

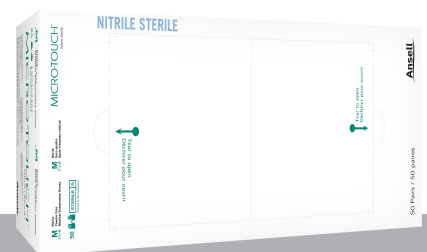

MICRO-TOUCH[®] Täglicher Schutz in allen Bereichen

Die MICRO-TOUCH[®]-Untersuchungshandschuhe der Premium-Klasse sind auf wissenschaftlicher Basis konzipiert und erfüllen alle medizinischen Anforderungen. Anspruchsvolle Merkmale sind beispielsweise ergonomische Technologien von Ansell, die den Tragekomfort bei langwierigen Eingriffen gewährleisten, ein innovativer Nassgriff, der eine sichere Instrumentenführung ohne gefährliche Fehler verhindert, und ein extrem dünner Beschichtungsfilm für eine maximale Tastsensibilität. Pflegepersonal, das optimal vorbereitet und durch die vielseitigen MICRO-TOUCH[®]-Ausführungen komfortabel geschützt ist, kann sich sorgenfrei auf die wichtigsten Aspekte seiner Arbeit konzentrieren: Gesundheit und Schutz der Patienten und der eigenen Person.

MICRO-TOUCH[®] Nitrile Sterile

Performance - Reihe

PRODUKTINFORMATIONEN

Material	Nitril	Nicht aus Naturkautschuklatex	Ja
Farbe	Blau	Cuff Länge	Verlängert
Puder Inhalt	Pudernfrei	Externe Handschuhoberfläche	Texturierte Finger
Freiheit von Löchern (Inspektionsstufe I)	AQL-Wert: 1,5	Palm Thickness (mm / mil)	0.11 / 4.3
Fingerdicke (mm / mil)	0.16 / 6.3	Allergie-Prävention	Latex (Typ I)
Verfügbare Größen	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8-9), XL (9.5 - 10)	Getestet Zur Verwendung mit Chemotherapeutika	Ja, gemäß ASTM D6978 und US FDA
Steril	Ja	Antistatische	Nicht getestet
Glove Länge (mm / Zoll)	290 / 11,6	Produkt Segmentation	Performance-Reihe

BESTELLINFORMATIONEN

Größe	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Bestellnummer	6034151	6034152	6034153	6034154

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Verpackung	50 Paar/Schachtel 4 Schachteln/Karton/Umkarton
Haltbarkeit	3 Jahre
Lageranleitungen	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. an einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten

NORMEN UND ZERTIFIKATE

ASTM D6978, ASTM D6319, Kategorie III, CE 2797, EN 16523-1, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2002

Chemische Vulkanisierbeschleuniger

Zinkdibutylidithiocarbamat (ZDBC)

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

Wenden Sie sich für Bestellungen oder weitere Informationen bitte an Ihren Ansell-Ansprechpartner.

Nordamerika
Tel. (USA): +1 800 952 9916
Tel. (KANADA): +1-844-494-7854
E-Mail: insidesalesus@ansell.com

Lateinamerika und Karibik
Tel.: +52 (442) 296 20 50
E-Mail: cslac@ansell.com
Tel. (Brasilien): +55-11-3356-3100
E-Mail: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Naher Osten und Afrika
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
E-Mail: info@ansell.eu

Asiatisch-Pazifischer Raum
Tel.: +603 8310 6688
E-Mail: apac.medical@ansell.com

Australien und Neuseeland
Tel.: +61 3 9270 7270
E-Mail: protection@ap.ansell.com