

Audiomètre MAICO MA 25

Léger et indépendant, pour un dépistage de base

Un concept compact aux lignes épurées

Ultra-léger, le MA 25 ne pèse que 980 g. Il est suffisamment petit pour tenir dans le creux de votre main ! Placé dans sa mallette de transport, le MA 25 est l'un de nos dispositifs portables les plus petits et les plus légers.

Une technologie précise et fiable

Comme il peut être transporté, le MA 25 a été conçu dans une optique de robustesse et de fiabilité. Vous pouvez emporter le MA 25 partout en toute confiance. Ses boutons pratiques facilitent le réglage de la fréquence et des niveaux auditifs pour un maximum de confort !

Gamme complète d'options de test

Le MA 25 propose une gamme complète d'opportunités de test. La plage de fréquence s'étend de 125 Hz à 8 000 Hz et les intensités de signal vont de -10 dB HL à 100 dB HL. Des sons sinusoïdaux et vobulés (pulsés et continus) viennent compléter les options disponibles.

Compatible avec Sessions : Préparez-vous pour un transfert de données très rapide !

Le dispositif MA 25e est entièrement compatible avec Sessions, la solution intuitive de transfert de données de MAICO. Gérez vos données et visualisez-les facilement.

Aperçu des caractéristiques

- Conduction aérienne sur 11 fréquences allant de 125 à 8 000 Hz
- Personnalisez les fréquences en fonction de vos besoins
- Fonctionne avec 3 piles AA standard ou en mode écologique avec une alimentation externe approuvée pour un usage médical (en option)
- Sons purs, pulsés et vobulés
- Extrêmement léger, il ne pèse que 980 g
- Le MA 25e étend encore les fonctions du MA 25
- Le logiciel PC MAICO Sessions disponible en option peut être connecté à la base de données des patients OtoAccess® ou à Noah pour simplifier la gestion des données



Données techniques

SPECIFICATIONS DU MA 25

Signaux de test	Sons sinusoïdaux et vobulés (pulsés et continus)
Fréquences de test (en Hz)	125, 250, 500, 750, 1 000, 1 500, 2 000, 3 000, 4 000, 6 000, 8 000
Pas de niveau	5 ou 1 dB
Plage de niveau d'audition avec casque DD45	-10 dB HL — 100 dB HL 70 dB HL à 0,125 kHz, 90 dB HL à 0,25 et 8 kHz
Catégorie de l'audiomètre	Classe 4 selon la norme EN 60 654-1

GENERALITES

Dimensions	22,5 cm x 18 cm x 5,5 cm
Poids	980 g
Alimentation	3 piles AA (autonomie typique de 100 heures) ou alimentation électrique en option

LE MA 25E ETEND ENCORE LES FONCTIONS DU MA 25

Le MA 25e étend les fonctionnalités du MA 25 en proposant un test automatique selon Hughson-Westlake. Les paramètres s'adaptent facilement à vos préférences personnelles. La fonction Microphone Praticien (Talk Forward) fait du MA 25e un appareil facile à utiliser, en particulier dans les cabines audiométriques.

COMPOSANTS STANDARD

- Casque DD45
- Bloc-notes audiogramme
- Manuel d'utilisation
- Guide rapide

ACCESSOIRES EN OPTION

- Casque DD65
- Poire de réponse patient
- Mallette
- Alimentation électrique

LOGICIEL MA 25E EN OPTION

- Test Hughson/Westlake
- Logiciel PC MAICO Sessions
- Base de données OtoAccess®
- Base de données Noah

NORMES

EN 60 601-1,
EN 60 645-1, classe 4,
selon la directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.




Les spécifications sont susceptibles d'évoluer sans préavis.

Composants standard



Appareil MA 25

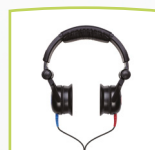

Casque DD45

Bloc-notes
audiogramme

Accessoires/ logiciel en option



Casque DD65

Poire de réponse
patient

Mallette

MAICO Sessions
Logiciel PCOtoAccess®
Base de donnéesBase de données
Noah

MAICO Diagnostics GmbH

Sickingenstr. 70-71 · 10553 Berlin · Allemagne
Tel.: +49 30/70 71 46-50 · Fax: +49 30/70 71 46-99
sales@maico.biz · www.maico.biz